

# 感染対策用品

## ■ BFE値とは…

BFE(Bacterial Filtration Efficiency)値は、フィルターの性能(バクテリア濾過効率)を示す値です。  
 BFE値95%以上のマスクとは、黄色ブドウ球菌がフィルターを通過する際その全量のうちの95%以上を濾過することができるフィルターが使われていることを示しています。


### 装着方法 (P17-18掲載品)



1 顔にマスクをつけ、耳にゴムを掛けます。ヒモタイプの場合はヒモを結びます。

2 ノーズブリッジを鼻型にそって曲げます。


3 ノーズブリッジを押えながら、マスクをあごの下まで引っ張り、ブリーツを伸ばします。

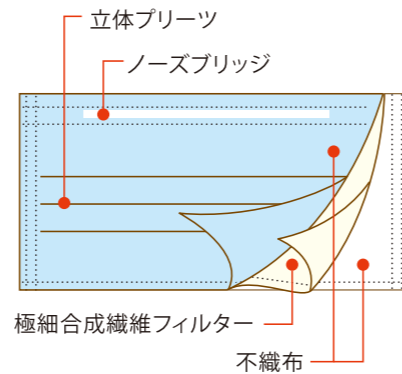

### ■ マスクフィルター性能

掲載頁	商品名	性能	試験
P17	タケトラシールド付マスク	BEF値99%以上	NELSON LABORATORIES, INC. 測定
	サージマスクT	BEF値95%以上	・試験方法 ASTM F2101-07 ・試験機関 財団法人 日本化学繊維検査協会
P18	サージマスクTC		・試験方法 JIS L 1912(MIL-M-36954C) ・試験機関 財団法人 日本化学繊維検査協会
	サージマスクAC		
P19	サージマスクN-95(折りたたみ式)	N-95規格準拠	NIOSH認証 (National Institute for Occupational Safety and Health)
	サージマスクN-95(カップ型)		

### 大きさを比べてみよう!

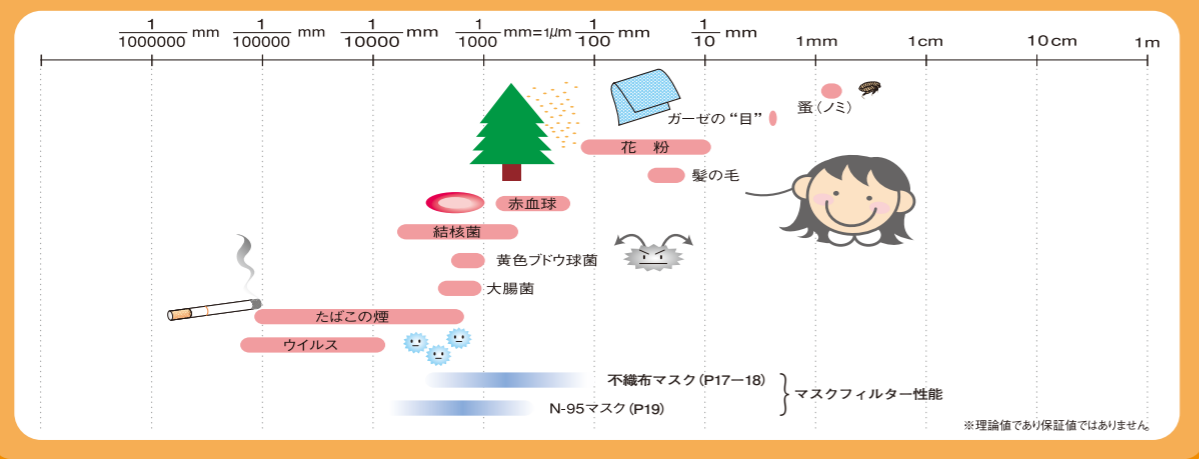

## タケトラ® シールド付マスク

- マスクと一体のシールドが、切削粉塵・血液などの飛沫から術者の眼を保護し、眼からの感染を予防します。
- シールドの両サイドのスリットを折り曲げることで、側面からもガードします。
- くもり止め加工が、装着者の呼気によるシールドのくもりを防止します。
- 眼鏡をかけたままでも装着できます。
- **4層構造で細菌を効果的に遮断します。(BFE値99%以上)**
- ノーズブリッジ: 可燃性合成樹脂



シールドのスリットを顔の側面に合わせて折ります。



商品番号	規格	単位
076058	ブルー 9cm×17.5cm 25枚入	1箱



## サージマスク T

- センターにプラスチックプレートが入っているため、より口もとに空間を作ります。
- ソフトな丸ゴムを使用しています。
- 3層構造で細菌を効果的に遮断します。(BFE値95%以上)
- ノーズブリッジ: 可燃性合成樹脂



商品番号	規格	単位
076080	ブルー 9cm×17cm 50枚入	1箱
076093	ピンク 9cm×15cm 50枚入	1箱

口腔内用品

患者用用品

感染対策用品

手洗い関連用品

清拭用品

サポート用品

口腔内用品

患者用用品

感染対策用品

手洗い関連用品

清拭用品

サポート用品